

MOBI 45

MOBELI®

DES SOLUTIONS D'AUJOURD'HUI

MOBILITY BEYOND LIMITS

Sans perçage

Sans vis

Pose gratuite !!

Souvent copiées

Jamais égalées !

Pour votre sécurité

Exigez l'original !



MOBELI : des poignées de maintien amovibles, que vous pouvez emmener partout avec vous !!!

Avez-vous déjà constaté combien une poignée, une barre de stabilisation est utile pour assurer un transfert sur les sanitaires, sous la douche ou, mieux encore, dans une baignoire ?

mais il existe cependant plusieurs problèmes

- les poignées traditionnelles doivent être fixées au mur en forant un trou, en plaçant des vis... qui sont rarement livrées avec les poignées
- toutes les cloisons ne peuvent pas être percées ou supporter des poignées ou barres traditionnelles vissées
- lorsque vous tentez de visser votre barre sur du carrelage, le risque de fendre celui-ci est important
- lorsque vous vous déplacez en extérieur, la barre ou la poignée (lorsqu'elle existe !!) est fixée à un endroit « type » qui ne vous convient pas car ne peut être adapté à tous les handicaps ou à votre force
- si vous êtes locataires, votre propriétaire verra-t-il d'un bon œil le fait que vous perciez les cloisons ? Avez-vous pensé à la perte possible du matériel en cas de déménagement ?

Les poignées de maintien amovibles **MOBELI®** peuvent résoudre tous ces problèmes.

Plusieurs versions sont à votre disposition : poignées une main, deux mains, télescopiques, enfants... et peuvent être munis d'accessoires judicieux.

Les poignées amovibles **MOBELI®** s'installent en un tour de main, sans perçage, et se démontent tout aussi facilement. Il suffit d'appliquer les ventouses de 120 mm de diamètre, réalisées en mélange de caoutchouc spécial, sur une surface lisse, non poreuse (carreaux de salle de bains/WC de 130 x 130 mm, verre de douche, panneaux en plexiglas, baignoire, meubles de cuisine, etc.), et de rabattre le levier à faire le vide, et le tour est joué.

Ces poignées présentent une adhérence très élevée et assurent un maintien sûr, en fonction de vos besoins, à la maison comme en voyage.

Les poignées amovibles **MOBELI®** sont peu encombrantes et démontables. *Pratique pour les voyages !!* En effet, les ventouses peuvent être facilement retirées de la poignée, sans outil.

Certaines poignées sont munies de 4 ventouses pour assurer une adhérence de 110 à 125 kg.

Les boîtiers blancs des ventouses et les culbuteurs sont en plastique à haute résistance (polyamide 6.6). Toutes les pièces métalliques sont en acier fin inoxydable.

Les poignées **MOBELI®** sont, certifiées par l'organisme allemand de contrôle technique TÜV, conformes aux directives européennes et certifiées par la fédération allemande de gérontologie.





Les ventouses de la nouvelle gamme MOBELI sont désormais munies d'indicateurs de sécurité ! (nous avons encore un peu de stock sur l'ancienne gamme...)

Surveillez en continu la qualité de fixation de votre barre !
Si un indicateur apparait, vous savez tout de suite qu'il faut refixer la ventouse.



Pour les surfaces munies de petits carreaux ou d'un carrelage non lisse ou d'une surface poreuse, MOBELI met à disposition des plaques adhésives préencollées en INOX (adhésif très résistant)

145 mm x 145 mm réf. 1461414
145 mm x 295 mm réf. 1461418

La charge maxi est de 20 kg par plaque



Choisir un support plat, rigide, bien arrimé et non friable, capable de supporter la charge maximale de l'accessoire. Les supports type placoplâtre enduit ou peint, le papier-peint, etc... sont à exclure absolument.



Les ventouses de la nouvelle gamme MOBELI peuvent désormais recevoir des verrous de sécurité

qui permettent

- La sécurisation de la barre contre le vol
- Le décrochage de la barre par l'utilisateur

La clé est identique pour toutes les serrures,

permettant ainsi l'utilisation simultanée de plusieurs jeux de verrous (dans un établissement médicalisé par exemple)



Désignation

Paire de verrous + une clé

Référence

14006 72




Les poignées à ventouses MOBELI ne sont pas des outils de suspensions.

Cette illustration n'a pas d'autre objectif que d'illustrer la très haute qualité du produit avec une parfaite qualité du support.


La personne mesure 1.90 m et pèse 94 kg !



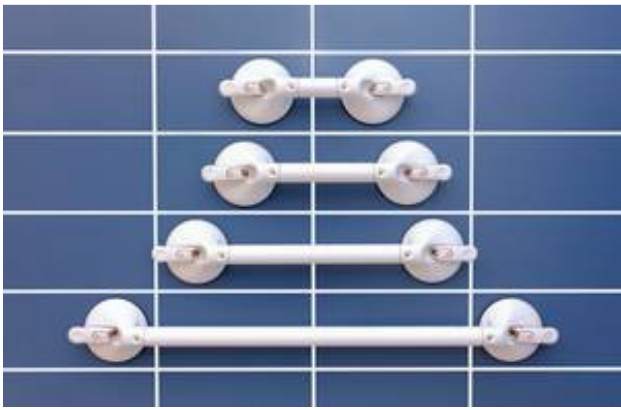

<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u> Poignée Totale	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Poignée 1 main	110 mm 330 mm	80 kg	14002 20 S
Poignée 2 mains	210 mm 430 mm	75 kg	14002 25 S
Poignée 2 mains	350 mm 570 mm	70 kg	14002 26 S
Poignée 2 mains	650 mm 870 mm	70 kg	14002 27 S

Distance du mur à la poignée : 32 mm

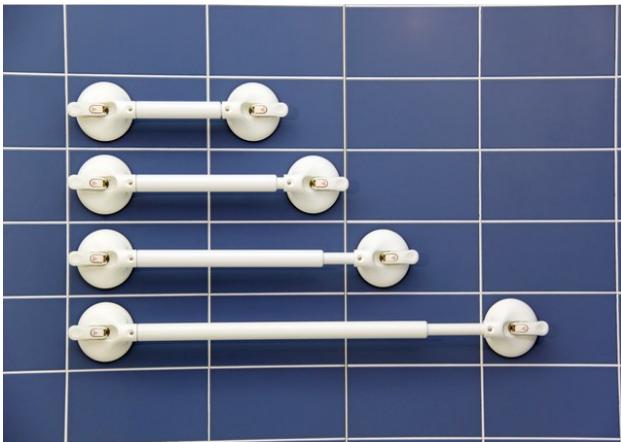

<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u> Poignée Totale	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Poignée télescopique 2 mains, petit modèle	220-345 mm 440-565 mm	65 kg	14002 21 S
Poignée télescopique 2 mains, modèle inter	340-465 mm 560-685 mm	65 kg	14002 22 S
Poignée télescopique 2 mains, grand modèle	440-565 mm 660-785 mm	65 kg	14002 23 S
Poignée télescopique 2 mains, grand modèle	665- 790 mm 885-1010 mm	60 kg	14002 24 S

Distance du mur à la poignée : 32 mm



<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u> Poignée Totale	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Poignée fixe pour enfant	170 mm 430 mm	60 kg	14002 28 S
	310 mm 570 mm	60 kg	14002 29 S

particularité : le diamètre de la poignée est réduit à 26 mm pour une préhension plus facile par des petites mains (contre 35 mm pour les autres poignées)

Vous ne souhaitez pas de blanc dans votre salle de bain ?

Optez alors pour **les barres « CHROM LOOK »** !!



<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u> <u>Poignée</u> <u>Totale</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Deux modèles			
	350 mm 570 mm	70 kg	14002 26 SCL
	650 mm 870 mm	70 kg	14002 27 SCL

comment allier esthétique et sécurité ?

tout simplement par un revêtement chromé effet « gouttes d'eau » permettant de créer un « grip » à la barre



Désignation

Référence

Paire de joints de cardan (INOX)

14005 55

L'utilisation des adaptateurs à cardan permet la possibilité d'applications des poignées télescopiques dans les angles.

Ils s'enfichent entre la ventouse et la barre.

L'adhérence est alors réduite à **40 kg**.


(incompatible avec barre une main 110 mm et les barres « Quattro »)

Utilisation des adaptateurs à cardan – illustration






<u>Désignation</u>		<u>Référence</u>
Paire d'Articulations simples (PLASTIQUE)		14005 58
L'utilisation de ces adaptateurs permet la possibilité d'applications des poignées télescopiques dans les angles.		
Ils s'enfichent entre la ventouse et la barre.		
L'adhérence est alors réduite (fonction de la longueur de préhension)		
(incompatible avec barre une main 110 mm et les barres « Quattro »)		
Alternative aux cardans INOX (mais moins polyvalents)		

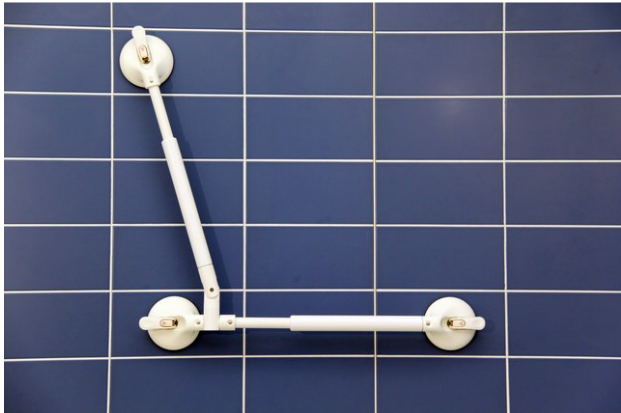

La barre en L est constituée d'une barre horizontale, modèle fixe 350mm ou télescopique 340-465mm, et d'un bras vertical articulé et télescopique 340-465mm.

<u>Désignation</u>		<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Barre horizontale fixe	350 mm	70 kg	14002 6H6 S
Barre horizontale télescopique	340-465 mm	65 kg	14002 2H2 S

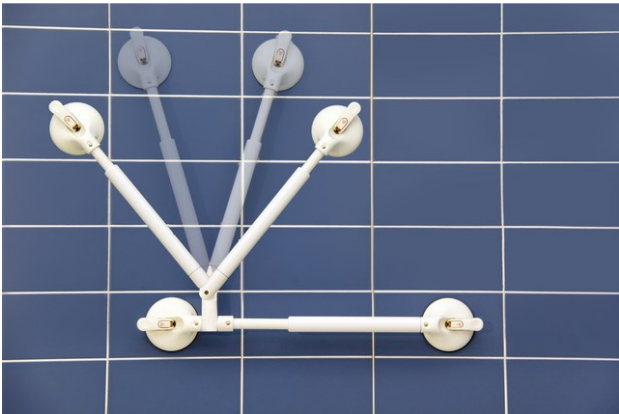



<u>Désignation</u>	<u>Longueur Poignée</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Quattro-Plus télescopique 200-325 mm		125 kg	14002 41 S
Quattro-Plus télescopique 320-445 mm		125 kg	14002 42 S
Quattro-Plus télescopique 420-545 mm		110 kg	14002 43 S
Quattro-Plus télescopique 645-770 mm		110 kg	14002 44 S

Spécificité : 4 ventouses et technique de joints à croisillon qui permettent d'éviter l'utilisation de joints de cardan dans les angles

- Illustrations sans ventouse équipée d'indicateur de sécurité -





Désignation

Référence

Paire d'articulation diagonales métal/plastique pour Quattro-Plus

14005 57



L'utilisation de ces cardans permet l'utilisation en diagonale des poignées Quattro-Plus ainsi que des combinaisons

Ils s'enfichent entre la ventouse et la barre

L'adhérence est alors réduite à **80 kg**.



Combinaison avec une barre Quattro-Plus et une barre télescopique

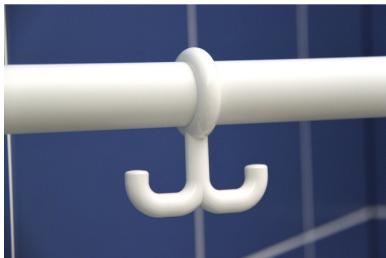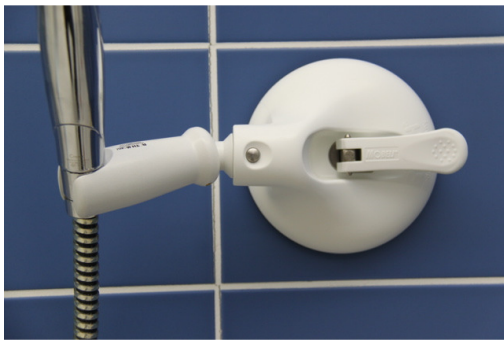

SUPPORT POUR POMMES DE DOUCHE

Votre douchette à votre hauteur !!!

Désignation

Référence

Support de pomme
de douche court

14002 02 S

- Illustrations sans ventouse équipée d'indicateur de sécurité -

Rallonge en option

1400600

Support de pomme
de douche long

14992 02 S

Vous souhaitez l'emmener en voyage avec vous ? Pas de problème, les ventouses restent démontables

Désignation

Référence

Crochet pour barre d'appui
Ou rallonge

1400581

Usage : suspension d'objets



AIDE AU TRANSFERT le « QUATTRO POWER »

<u>Désignation</u>	<u>Distance du mur</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Charge</u>	<u>Référence</u>
Quattro Power sans poignée	565 mm	730 mm	80 kg	14002 65 S
Quattro Power avec poignées	565 mm	850 mm	80 kg	14002 66 S

Les ventouses peuvent pivoter à 180 °

<= = Photo d'illustration sans la poignée verticale de 120 mm



« QUATTRO POWER » optimisé pour la baignoire

Existe en 2 longueurs avec ou sans poignée

<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u>	<u>Charge</u>	<u>Référence</u>
Quattro Power Long sans poignée	860 mm	50 kg	14002 61 S
Quattro Power Long avec poignée	980 mm	50 kg	14002 62 S
Quattro Power Court sans poignée	740 mm	50 kg	14002 63 S
Quattro Power Court avec poignée	860 mm	50 kg	14002 64 S

Les ventouses peuvent pivoter à 180 °

Les photos d'illustration sont avec la poignée de 120 mm



Mais aussi.....





LES RACCOURCISSEURS POUR LA BAIGNOIRE

<u>Désignation</u>	<u>Hauteur</u>	<u>Référence</u>
Raccourcisseur 2 ventouses	300 mm	14002 81 S

Pour tous types de baignoires.

Largeur de 510 mm en haut

← Utilisation verticale dans la baignoire

← Utilisation horizontale comme tablette

Raccourcisseur 3 ventouses	300 mm	14002 82 S
-------------------------------	--------	------------

Muni de 3 ventouses réglables par encliquetage ce raccourcisseur est adapté à des forces plus élevées.

Peut être transformée sans outils en variante 2 ventouses et servir aussi de tablette.

Ne peut être utilisé que dans des baignoires à parois parallèles.

Ajustable sur des baignoires de dimension d'environ 510 à 700 mm par orientation des ventouses sur les cotés

Les valeurs limites dépendent de l'angle et de la hauteur de la baignoire.

- Illustrations sans ventouse équipée d'indicateur de sécurité -

Illustrations avec ventouses équipées d'indicateurs de sécurité





LE PLOT DE STABILISATION SUR VENTOUSE POUR BAIGNOIRE

Désignation

Référence

14002 86 S

Pour tous types de baignoires dont le fond peut accepter la ventouse.

Pour le positionnement de la personne dans une baignoire.

Dispositif d'anti-sous-marinage

Facilite le lavage

Composé d'une ventouse avec indicateur de sécurité et d'un rouleau vertical

Il peut être défini comme un « plot d'abduction » pour baignoire




Dimension du rouleau

Hauteur 295 mm

Largeur 80 mm

En mousse de polyuréthane noir

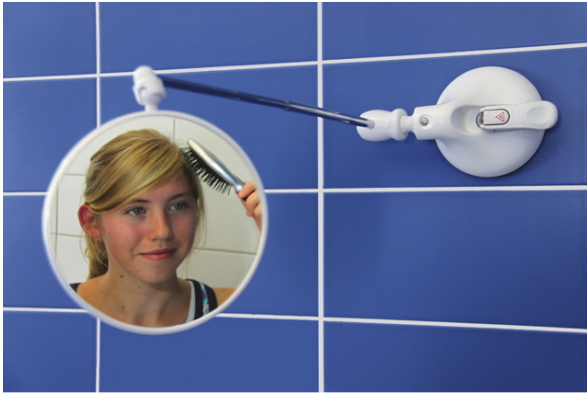

LE MIROIR LOUPE TELESCOPIQUE MOBILE

<u>Désignation</u>	<u>Longueur</u>	<u>Référence</u>
Miroir télescopique jusqu'à	800 mm	14002 09 S
Articulé		
Démontable		
Double face		
<ul style="list-style-type: none"> - Une face miroir normal - Une face loupe Grossissement x 5 		

Diamètre 15,2 cm

Pour ceux dont le miroir est trop loin et pour ceux qui se sondent

Rallonge en option	1400600
--------------------	---------

Accessoire : la lampe LED

Clip + LED Spot	14092 09
-----------------	----------

Durée de vie de la LED 100 000 h
Pile 1 x AAALRG 1,5 V (50 h)

Set complet Miroir + Lampe Led	14992 09 S
---------------------------------------	------------



<u>Désignation</u>	<u>Charge</u>	<u>Référence</u>
Support à deux doigts court	200 gr	14002 03 S
Rallonge en option 350 mm utiles		1400600



Support à deux doigts avec rallonge articulée	200 gr	14992 03 S
---	--------	------------

Usage : maintien d'accessoires comme le sèche-cheveux

Mise en garde : bien penser l'implantation par rapport au risque électrique



<u>Désignation</u>	<u>Charge</u>	<u>Référence</u>
Pince	2 kg	14002 04 S
Rallonge en option 350 mm utiles		1400600



Pince avec rallonge articulée	2 kg	14992 04 S
-------------------------------	------	------------

Usage : forte pince pour le maintien d'accessoires

Mise en garde : bien penser l'implantation par rapport au risque électrique



Désignation

Référence

Support de rideau de douche

14002 05 S

Protégez, votre salle de bain des éclaboussures, et votre intimité avec cette tringle à ventouses pour rideau de douche.

Précisions :


Pour douche uniquement (longueur de la barre 120 cm)

Barre livrée avec œillets de rideaux blancs (sans rideau)

La barre se redresse vers le haut à la manière d'une barrière.

Frein intégré

Ventouses orientables en position verticale (barre rabattable sur le côté dans ce cas)

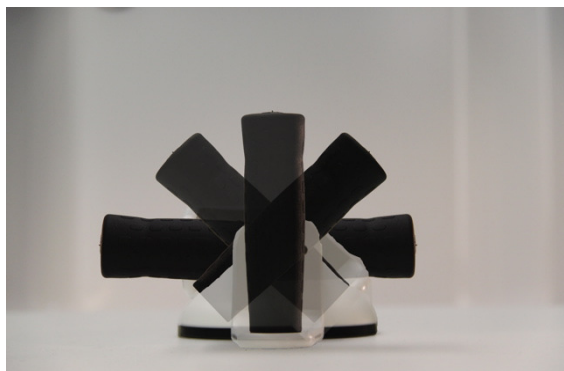

<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Stabi Horizontal	15 kg	14002 95 S
<u>Usage</u> : Poignée simple de stabilisation horizontale fixe		
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.		
La poignée est démontable sans outil pour pouvoir l'emporter partout		




<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Stabi Vario	15 kg	14002 96 S
<u>Usage</u> : Poignée de stabilisation mobile		
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.		
A la différence de la poignée simple horizontale, la poignée Vario se monte verticalement ou horizontalement, au choix, ou à 45 ° vers la gauche ou la droite, pour s'adapter ainsi aux besoins		



<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Référence</u>
Handi	10 kg	14090222
Longueur : 80 mm		
Poids : 220 g		
Matière : TPE certifié (Elastomère thermoplastique), sans PVC, facile à nettoyer		
<u>Usage</u> : Poignée de stabilisation fixe		
Immobilisation du bras / de la main par exemple en cas de maladie de Parkinson, ataxie, spasticité, etc.		
Poignée de stabilisation verticale uniquement (ventouse simple sans mécanique)		
Niveau d'adhérence moindre par rapport aux modèles Stabi Horizontal et Stabi Vario		



<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Longueur poignée</u>	<u>Référence</u>
Daisy Horizontal	10 kg	160 mm	14002 92 S
Daisy Vario	15 kg	120 mm	14002 91 S
<u>Usage</u> : Poignée de stabilisation fixe pour le premier modèle et mobile pour le second – pensée pour les enfants			
Le diamètre de la poignée est réduit à 26 mm pour une préhension par de petites mains			

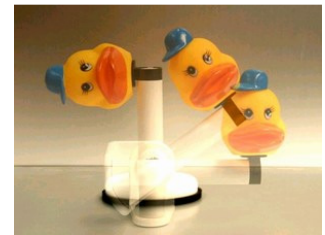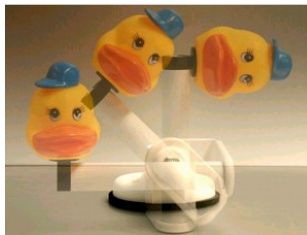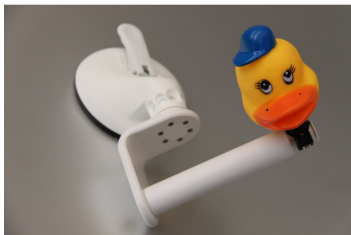



<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Diamètre des cannes</u>	<u>Référence</u>
Support DUO pour béquilles	30 kg	20 à 30 mm	14002 06 S

Usage : Double support de cannes pour rangement sur toute surface lisse et non poreuse (verre, carrelage, PVC, etc...)

Le diamètre de la ventouse est le diamètre habituel de 120 mm

<u>Désignation</u>	<u>Adhérence</u>	<u>Diamètre des cannes</u>	<u>Référence</u>
Support pour béquille	15 kg	20 à 30 mm	1409120

Diamètre de la ventouse : 80 mm

Longueur de l'ensemble : 93 mm

Poids : 450 g

Usage : Rangement des cannes sur toute surface lisse et non poreuse (verre, carrelage, PVC, etc...)

Vendu à l'unité

Information importante (donnée du fabricant) : Pour se relever d'une position assise, une force de retenue d'environ 35 à 40 kg est nécessaire pour des personnes de 75 kg. Les adhérences données au travers des fiches techniques ne correspondent donc pas aux poids des personnes. Les poignées **MOBELI®** sont des aides au maintien et non pas des outils de suspensions.

Comment acheter ?

Tous les produits **MOBELI®** présentés sur ce catalogue sont disponibles

- par correspondance au moyen du bon de commande-tarifs disponible en téléchargement libre à l'adresse <http://www.mobi45.com/pages/mobeli.htm> ou mieux encore, pour un achat sécurisé,
- sur simple demande téléphonique (des conseils supplémentaires pourront vous être fournis et un devis précis avec un délai de livraison vous sera alors proposé).

Carte bancaire sécurisée à distance, Paypal®, le chèque, le virement, tous les moyens de paiements sont acceptés

Pour nous contacter →

MOBI 45
Distributeur MOBELI
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES

Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28

E-mail : contact@mobi45.com

et 24h/24 sur Internet
au
www.mobi45.com
Rubrique « Contact »

et sur devis le mobilier de salle de bain...

